


Instructions de Sélection



Mesurer de distal
canine supérieure gauche



à distal
canine supérieure droite

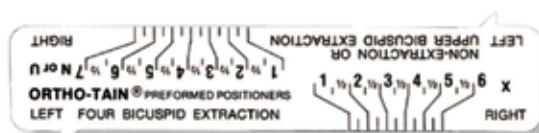

Placer le pointeur de la réglette blanche au distal de la canine Supérieure Gauche, courber la réglette pour suivre le bord libre des incisives et lire la taille au distal de la canine droite.

Pour la contention après dépose des brackets, choisir un appareil une demie taille plus petite que la taille mesurée pour un meilleur résultat.

Note : Un côté de la réglette correspond aux cas sans extractions et les cas avec 2 extractions de prémolaires supérieures, l'autre aux cas avec extraction de 4 prémolaires.

Série «N» Sans Extractions

Tailles	Mesure 6 Antérieures- Permanentes (mm)	Facteur d'usage
1 N	39.5-40.9	2%
1-1/2 N	41.0-42.4	3%
2 N	42.5-43.9	4%
2-1/2 N	44.0-45.4	6%
3 N	45.5-46.9	7%
3-1/2 N	47.0-48.4	10%
4 N	48.5-49.9	14%
4-1/2 N	50.0-51.4	16%
5 N	51.5-52.9	14%
5-1/2 N	53.0-54.4	12%
6 N	54.5-55.9	10%
6-1/2 N	56.0-57.4	3%
7 N	57.5 & +	2%

Série «X» 4 Extractions

Tailles	Mesure 6 Antérieures- Permanentes (mm)	Facteur d'usage
1 X	45.5-46.9	3%
1-1/2 X	47.0-48.4	6%
2 X	48.5-49.9	7%
2-1/2 X	50.0-51.4	9%
3 X	51.5-52.9	11%
3-1/2 X	53.0-54.4	16%
4 X	54.5-55.9	17%
4-1/2 X	56.0-57.4	12%
5 X	57.5-58.9	9%
5-1/2 X	59.0-60.4	6%
6 X	60.5 & +	4%

Série «U» 2 Extractions (Maxillaire)

Tailles	Mesure 6 Antérieures- Permanentes (mm)	Facteur d'usage
2 U	42.5-43.9	4%
2-1/2 U	44.0-45.4	6%
3 U	45.5-46.9	8%
3-1/2 U	47.0-48.4	11%
4 U	48.5-49.9	16%
4-1/2 U	50.0-51.4	18%
5 U	51.5-52.9	16%
5-1/2 U	53.0-54.4	12%
6 U	54.5 & +	9%

Positioner®

Contention active après dépose des brackets

Contention immédiate après dépose des brackets

Conçus pour obtenir une occlusion idéale de classe I

- Contention immédiate après dépose des brackets
- Complètement préfabriqué, pas de coût de laboratoire
- Remplacement immédiat en cas de perte de l'appareil
- Préserve les corrections de l'overjet et de l'overbite
- Corrige efficacement la plupart des problèmes d'ATM
- Conçus pour obtenir une occlusion idéale de classe I (Positionneur en bout à bout)
- 3 duretés disponibles
 - Soft 40db
 - Medium 60db
 - Hard 70db



Modalités de port :

Généralement, le positionneur est porté de manière passive pendant la nuit. Toutefois, un port actif (avec exercices) d'une heure par jour (3 plages de 20 minutes) est plus efficace qu'une nuit de port passif (pendant le sommeil, les arcades ne sont pas serrées). Ce port actif peut être recommandé pour prolonger la contention à raison de deux jours par semaine.

Choix de la dureté :

La dureté "Medium" est la plus utilisée. Elle allie une bonne acceptation du patient et une bonne durabilité de l'appareil. Toutefois, l'orthodontiste préférant une action très douce choisira la dureté "Soft", mais l'appareil est beaucoup plus fragile. Pour les patients très toniques ou présentant une supraclusion résiduelle ou sujets au bruxisme, la dureté "Hard" sera privilégiée. Dans ce cas, on peut rendre les premiers jours plus "confortables" en immergeant le positionneur pendant quelques minutes dans de l'eau chaude (30 à 40 °).



DEPOSE DES BRACKETS



ORTHO-TAIN® Porté 3 semaines



DEPOSE DES BRACKETS



ORTHO-TAIN® Porté 1-1/2 mois



DEPOSE DES BRACKETS



ORTHO-TAIN® Porté 3-1/2 mois